

for Patients and Medical Professionals
For Polar Pads and WrapOn Polar Pads

The Polar Pad can be cold enough to seriously injure the skin. The Polar Pad is non-sterile and for single patient use only. Do not attempt to sterilize the Pad. Follow these instructions and the Operating Instructions and Product Inserts provided with the Polar Care continuous-flow cold therapy units (available at www.breg.com or 1-800-321-0607).

-
- Polar ou retirez-le.
- Polar Pad with Polar Wrap
Coussinet Polar avec enveloppement froid
Almohadilla polar con envoltura polar
- 1 2 3 4 5

pour les patients et membres du corps médical
Pour les coussinets Polar et les coussinets d'enveloppement Polar


Le coussinet Polar peut être froid au point de créer de sérieuses lésions cutanées. Le coussinet Polar est non stérile et à patient unique. Ne pas essayer de le stériliser. Suivre ces instructions, ainsi que le mode d'emploi et les notices des produits joints aux éléments de thérapie par le froid à débit continu Polar Care (en vente sur www.breg.com ou en appelant le 1 800 321-0607).

-
- The diagram illustrates the application of a Polar Pad with an elastic bandage in five steps:
- 1**: The patient is lying down with the leg extended.
 - 2**: The Polar Pad is placed over the knee joint.
 - 3**: The elastic bandage is wrapped around the knee joint, starting from the bottom and moving upwards.
 - 4**: The elastic bandage is wrapped around the knee joint, continuing the spiral pattern.
 - 5**: The elastic bandage is fully wrapped around the knee joint, securing the Polar Pad.
- Labels in the diagram:
- Polar Pad with elastic bandage
 - Coussinet Polar avec bandage élastique
 - Almohadilla polar con vendaje elástico


para pacientes y profesionales médicos
Para Almohadillas polares regulares y Almohadillas polares de envoltura

La Almohadilla polar puede estar lo suficientemente fría como para lesionar gravemente la piel. La Almohadilla polar no es estéril y se debe utilizar en un solo paciente. No intente esterilizarla. Siga estas instrucciones y las Instrucciones de funcionamiento y Prospectos del producto proporcionados con las unidades Polar Care de terapia fría de flujo continuo (disponibles en www.breg.com o llamando al 1-800-321-0607).


- Polar Dressing application:**
Application du pansement Polar :
Aplicación de la venda polar:

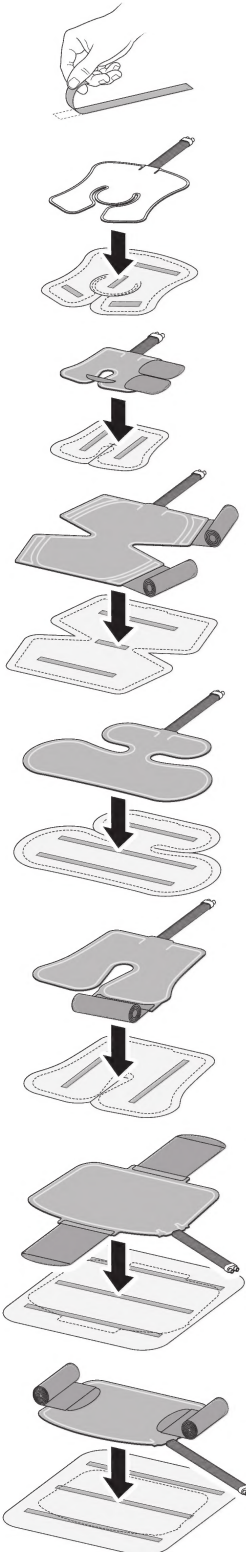


WrapOn Polar Pad– Knee
Coussinet d'enveloppement Polar – genou
Almohadilla polar de envoltura para rodillas

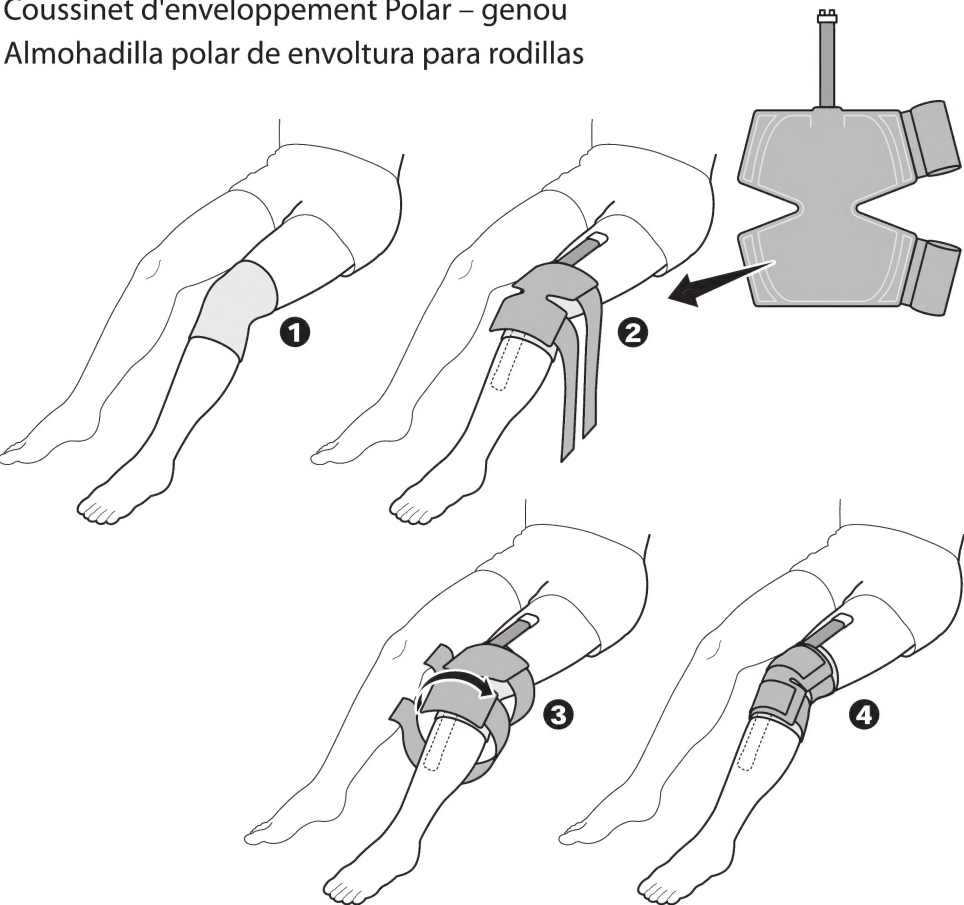


WrapOn Polar Pad – Shoulder
Coussinet d'enveloppement Polar – épaule
Almohadilla polar de envoltura para hombros

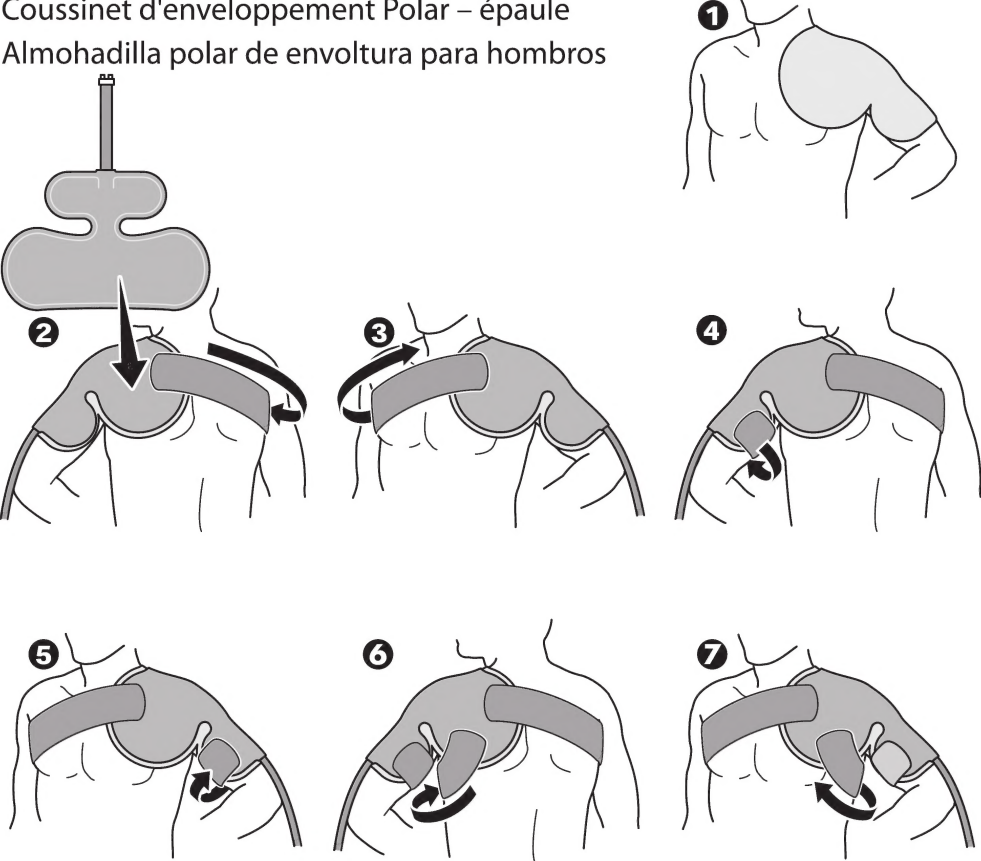


WrapOn Polar Pad – Ankle
Coussinet d'enveloppement Polar – cheville
Almohadilla polar de envoltura para tobillos

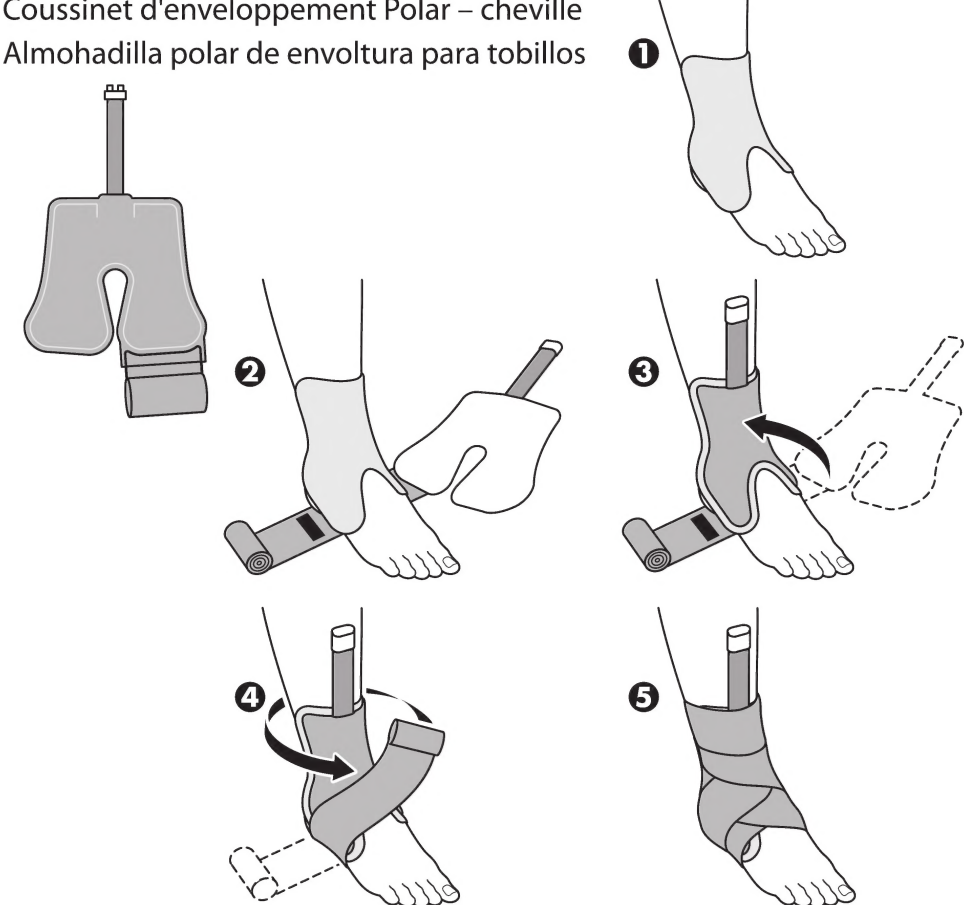

WrapOn Polar Pad – Hand/Wrist
Coussinet d'enveloppement Polar – main/poignet
Almohadilla polar de envoltura para manos/muñecas

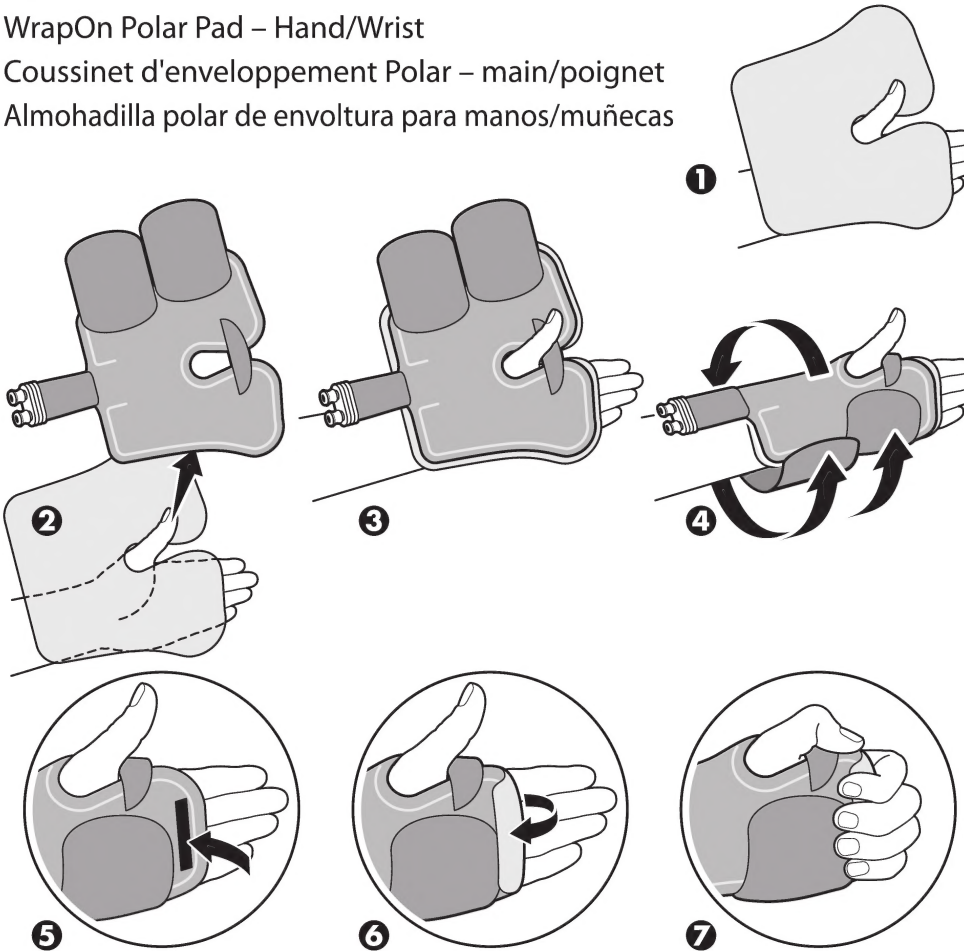

WrapOn Polar Pad – Back with Back Support (sold separately)
Coussinet d'enveloppement Polar – dos, avec soutien pour le dos (vendu séparément)
Almohadilla polar de envoltura para la espalda con soporte de espalda (se vende aparte)

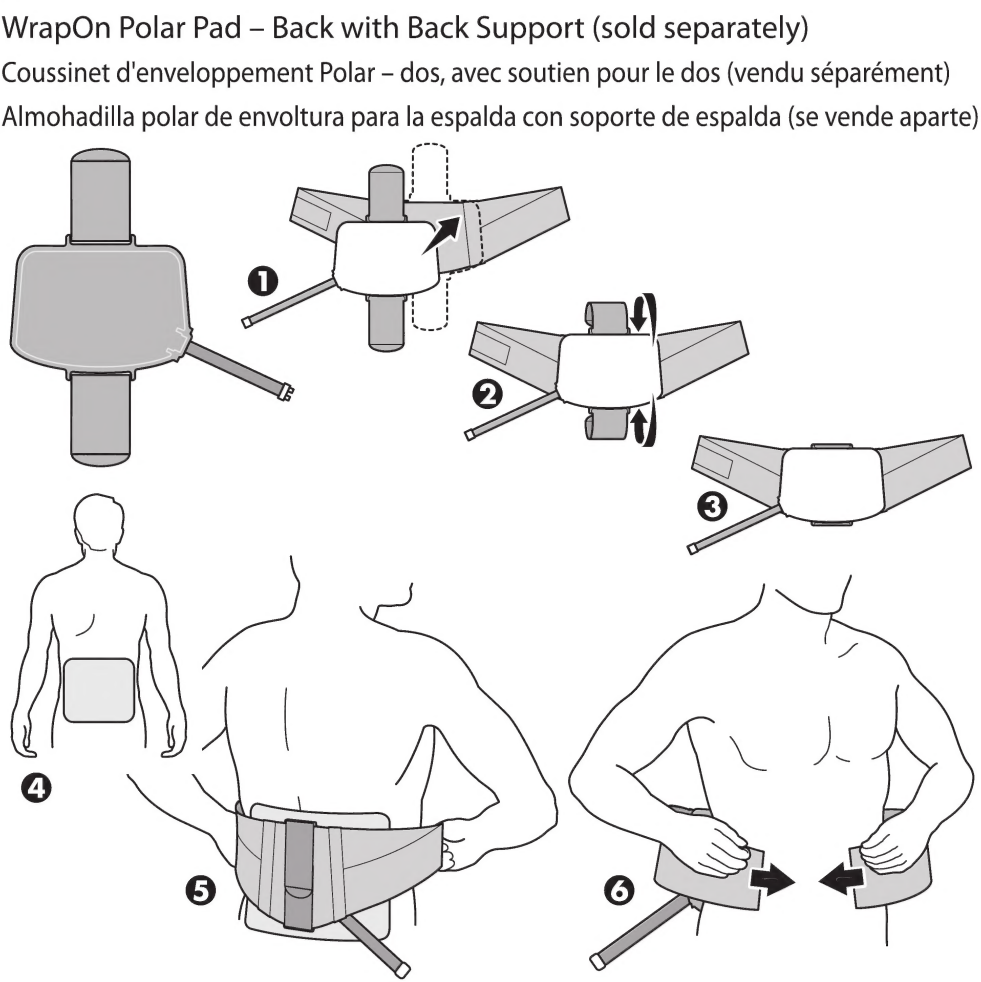

WrapOn Polar Pad – Back with straps
Coussinet d'enveloppement Polar – dos, avec sangles
Almohadilla polar de envoltura para la espalda con tirantes

